

平成 28 年 2 月 3 日

診療科
中央診療施設 殿
各病棟


薬剤部 薬品試験室

テイコプラニン血中濃度測定試薬のロット変更に伴う 一時的な測定値補正のお知らせ

テイコプラニンの血中濃度測定用試薬（ナノピア®TDM テイコプラニン）のロット変更により、測定値が旧ロットと比較して約 30%高値となることがわかっております（下記グラフ）。

ロット間で高い相関係数が得られておりますので、現行ロットの間は、相関式をもとに測定結果を補正した値を報告させていただきます。補正後の値は、旧ロットで測定した値から±10%の範囲内の値であることを確認できており、診療上は大きな影響のない誤差範囲であると考えられます。

テイコプラニン測定値

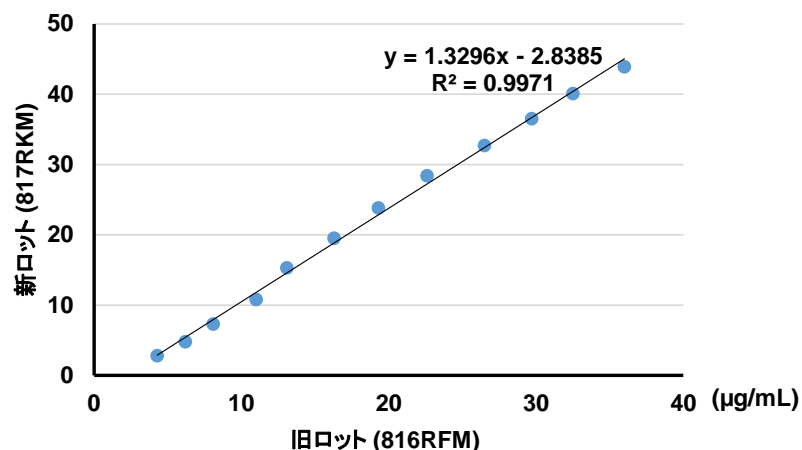

また、40μg/mL 以上の高濃度域では上記の相関から外れてしまうため、補正を行うことができません。よって、40μg/mL 以上の測定結果が得られた場合は「> 40.0」として報告させていただきます。

※ 上記についてのお問い合わせは薬剤部薬品試験室(2711)へお願いします。